

Thermo Scientific

全自动药敏试验 / 菌液接种仪

Thermo Scientific 全自动药敏试验菌液接种仪，可以快速准确地完成 96 孔药敏检测板的菌液接种。

安全可靠

具备 FDA, CE 认证，国外众多微生物实验室使用

全封闭移液头，避免样本在 96 孔板上移动时气溶胶引起交叉污染。



灵活方便

可完成同一 96 孔板多种菌液的加样
分区域加样模式：

可完成 2-3 个不同区域接种

分排加样模式：

可完成横排竖排的单菌接种

完成一块 96 孔板加样时间小于 1 分钟

独特原理

独特的移液头设计，定量分配精确接种。

无需吸样过程，直接将试管中的菌液接种至 96 孔板中。

加样量范围：50-200 μ l。



AIM

轻松点击，一键启动

LCD 触摸屏操作，图标式菜单选择。

加样顺序可任意选择，直接点击目标区域即可。

不同区域加样状态通过颜色标识。



比浊仪

提供标准化的菌液浓度配置

药敏试验

- 配备实时照相设备，将每个药敏板的数字图像呈现到分析软件
- 可视化的细菌生长图像，易于读取，避免人工误差
- 仪器背景光可调节，更好地呈现药敏板的图像
- 系统获得 FDA, CE 认证

数据处理



- 通过软件查看药敏板数字图像及细菌生长情况，抗生素及相应浓度由网状分格显示，用户选择药物的 MIC 值快速判读结果
- SWIN 软件遵循 FDA、CLSI、EUCAST 等标准，通过不同颜色标识药敏结果 (S, I, R)，并通过开放式的三级专家系统，提出建议及修改

软件应用

- 所有药敏板数字图像均可保存，用于重新判读或导出保存
- 实验室可根据地区的特殊性，定制化专家规则
- 具备流行病学统计和质量控制功能
- 操作系统 WIN 7/ XP，全中文操作软件，提供 LIS 联网接口

药敏板

采用最佳的微量肉汤稀释法用于药敏检测，报告真实的 MIC 结果。药敏板包括 4-12 个稀释浓度的全值板和 1-4 个稀释浓度的阈值板。

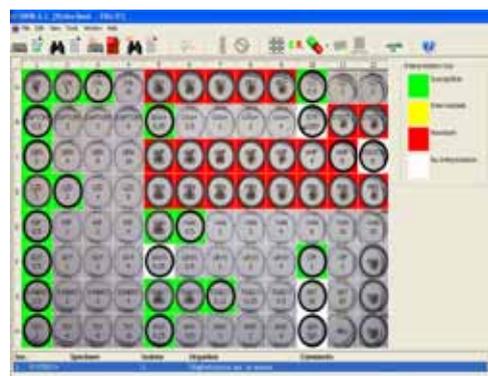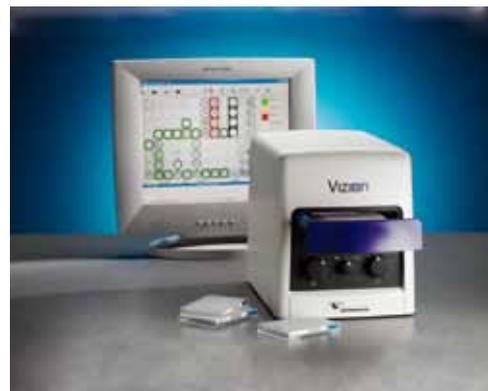

沙门氏菌药敏板	葡萄球菌药敏板
弯曲菌药敏板	链球菌药敏板
嗜血杆菌药敏板	肠球菌药敏板
革兰氏阴性菌药敏板	革兰氏阳性菌药敏板
真菌药敏板	厌氧菌药敏板

www.thermoscientific.com (英文) www.thermo.com.cn (中文) www.trekds.com 800-810-5118 400-650-5118

© 2012 赛默飞世尔科技保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技及其旗下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。并非所有产品均可在所有国家提供。详情请向您当地的销售代表咨询。

上海 上海浦东新区新金桥路27号7号楼 电话: 86-21-68654588 传真: 86-21-61086175	北京 北京安定门东大街28号雍和大厦西楼7层 电话: 86-10-84193588 传真: 86-10-84193583	北京工厂地址: 天竺空港工业区B区裕华路28号10号楼3层 电话: 010-80499033 传真: 010-80495033	广州 广州东风中路410-412号时代地产中心3003-3004室 电话: 86-20-83145188 传真: 86-20-83486621	成都 成都临江西路1号锦江国际大厦1406 电话: 86-28-8554 5388 传真: 86-28-8503 2858	沈阳 沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109室 电话: 86-24-3109 6388 传真: 86-24-3109 6368
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------